


Commission des patients/ID de configuration _____



Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB9669-L0950	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS1910-040	rondelle de friction, Ø = 19 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS1910-045					
3	GS1910-050					
3	GS1910-055					
3	GS1910-060					
4	VE3771-010/20	amortisseur à joint torique	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5a	BP1110-L050	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SL0252-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SL0252-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium**				
7a	VE3771-08/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7c	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**			tous les 6 mois	18 mois
9	PN0004-L02	amortisseur de butée**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11	SL0282-04	butée d'extension**	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
12	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
13	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-13	SL2952-L	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6-13	SL2952-R	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				

Commission des patients/ID de configuration _____

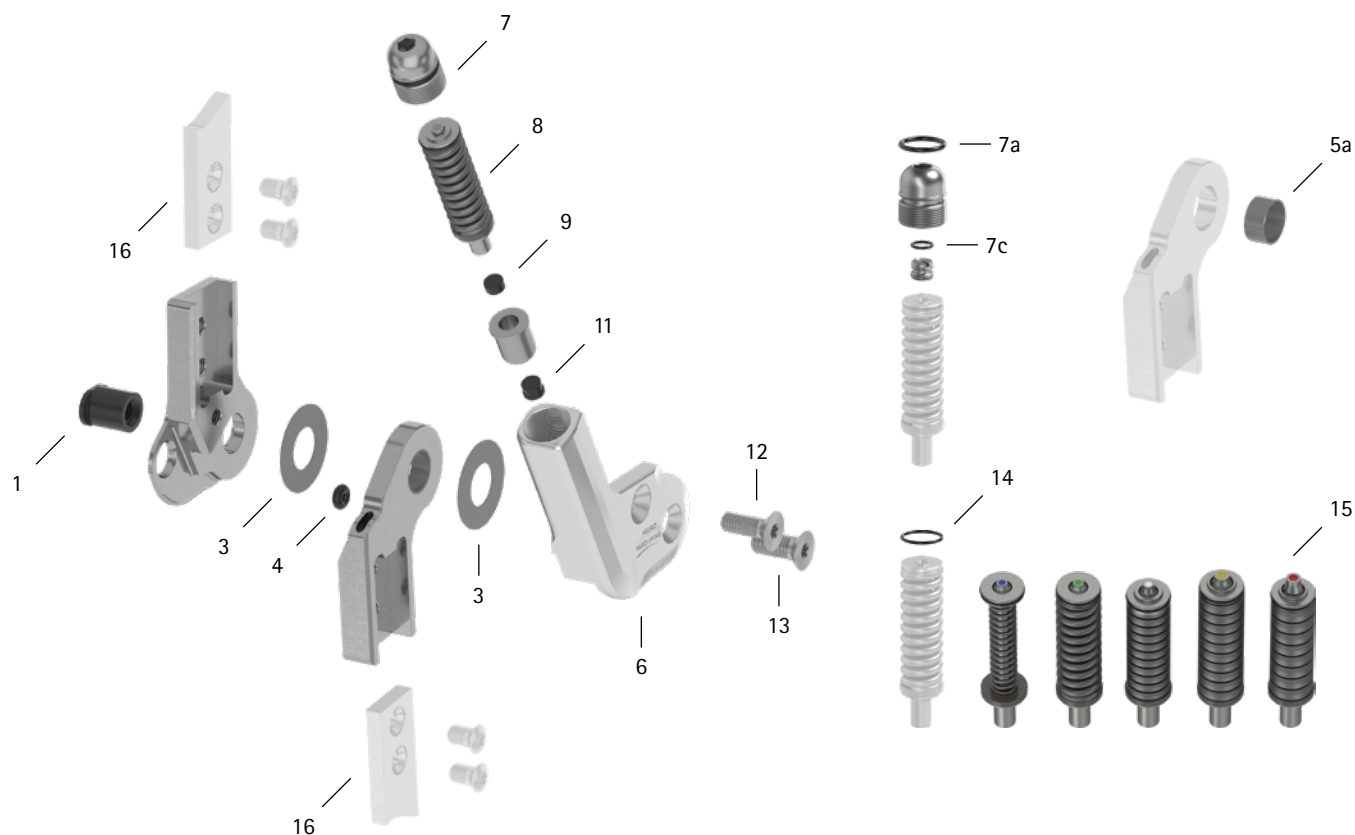

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Mécanismes de ressort						
14	VE3771-06/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5801-15/03	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure glissement des rondelles Belleville bruit du mécanisme de ressort avec ressort de pression bruit du mécanisme de ressort avec des rondelles Belleville	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5801-15/06	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°		réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince		
15	SH5801-10/12	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°		graisser le ressort de pression avec de la graisse pour articulation d'orthèse ou de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
15	SH5801-10/19	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°		graisser les rondelles Belleville avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
15	SH5801-05/33	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
16	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément