


Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_

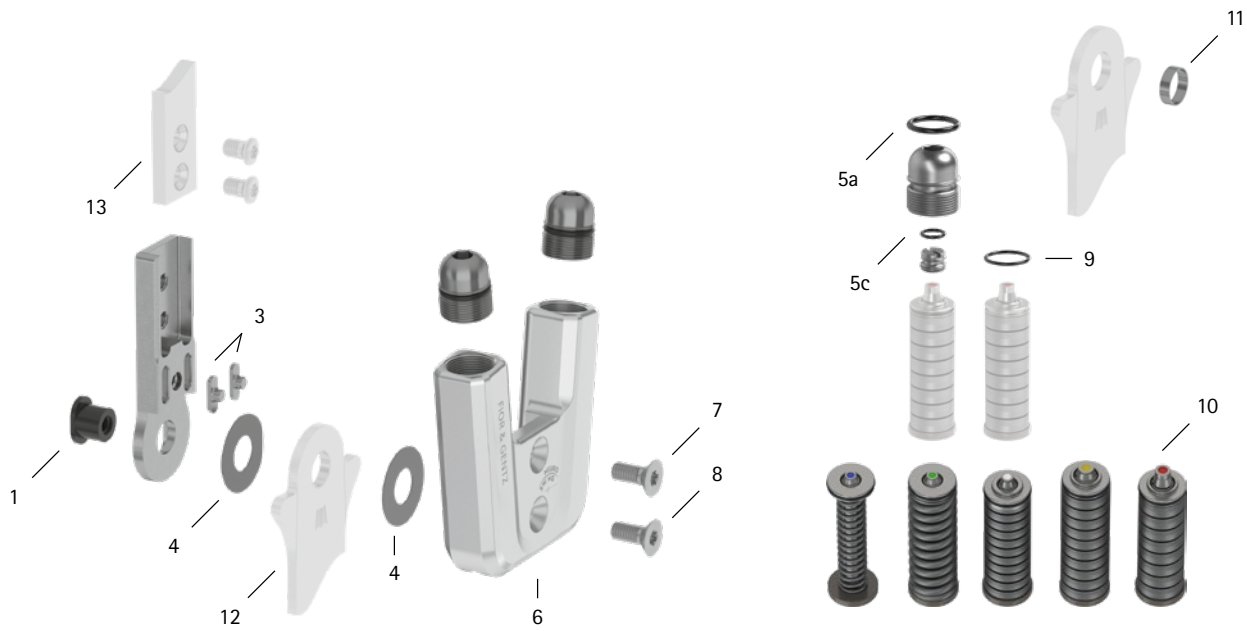

Pos.	12 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB7049-L0590	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0391-01	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS1407-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1407-045					
4	GS1407-050					
4	GS1407-055					
4	GS1407-060					
5a	VE3771-08/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5c	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SF0561-2/AL	plaque supérieure**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
5-8	SF5971-AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
<b>Mécanismes de ressort</b>						
9	VE3771-06/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	SF5801-15/03	mécanisme de ressort, bleu, normale, liberté de mouvement max. 15°	bruit du mécanisme de ressort	graisser le mécanisme de ressort avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)	tous les 6 mois	18 mois
10	SF5801-15/06	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°				
10	SF5801-10/12	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°				
10	SF5801-10/19	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
10	SF5801-05/33	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
11	BR0807-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
13	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

\*\* fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

\*\*\* composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément

WPF0029-FR-2024-12