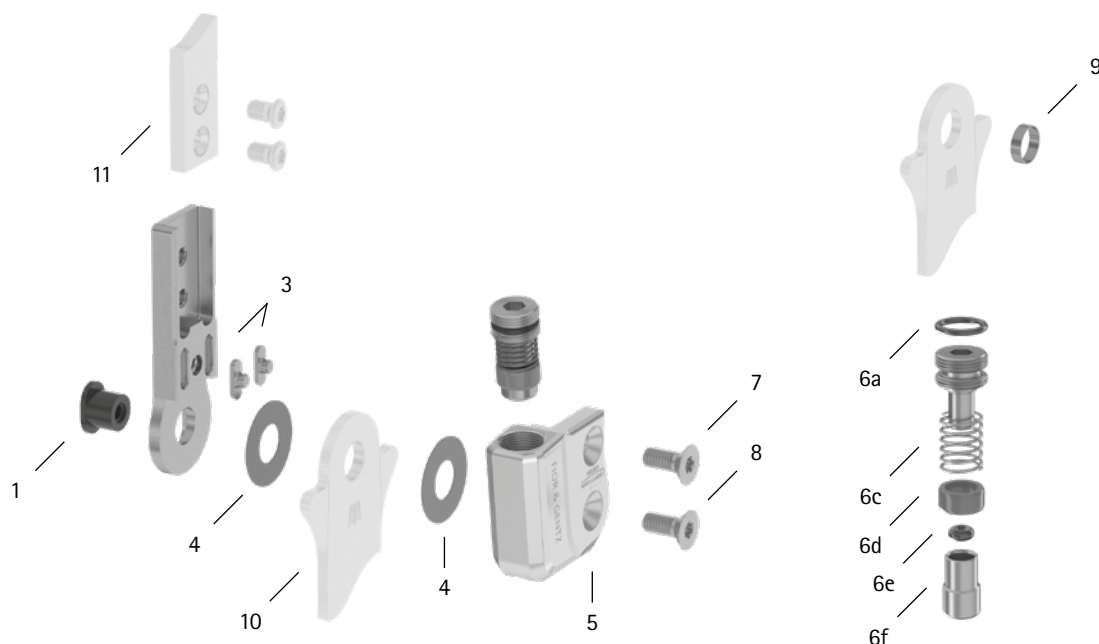




Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB8559-L0630	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0392-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
5	SH0662-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SH0662-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite**				
6a	VE3771-08/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6c	FE1916-01	ressort de pression**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6d	GS1007-350	douille de guidage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6e	VE3771-010/20	amortisseur à joint torique**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6f	SH0492-01	piston**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
5-8	SH6972-L/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5-8	SH6972-R/AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
9	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
11	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément