
Plan de maintenance NEURO SWING Carbon 24 mm

Commission des patients/ID de configuration _____

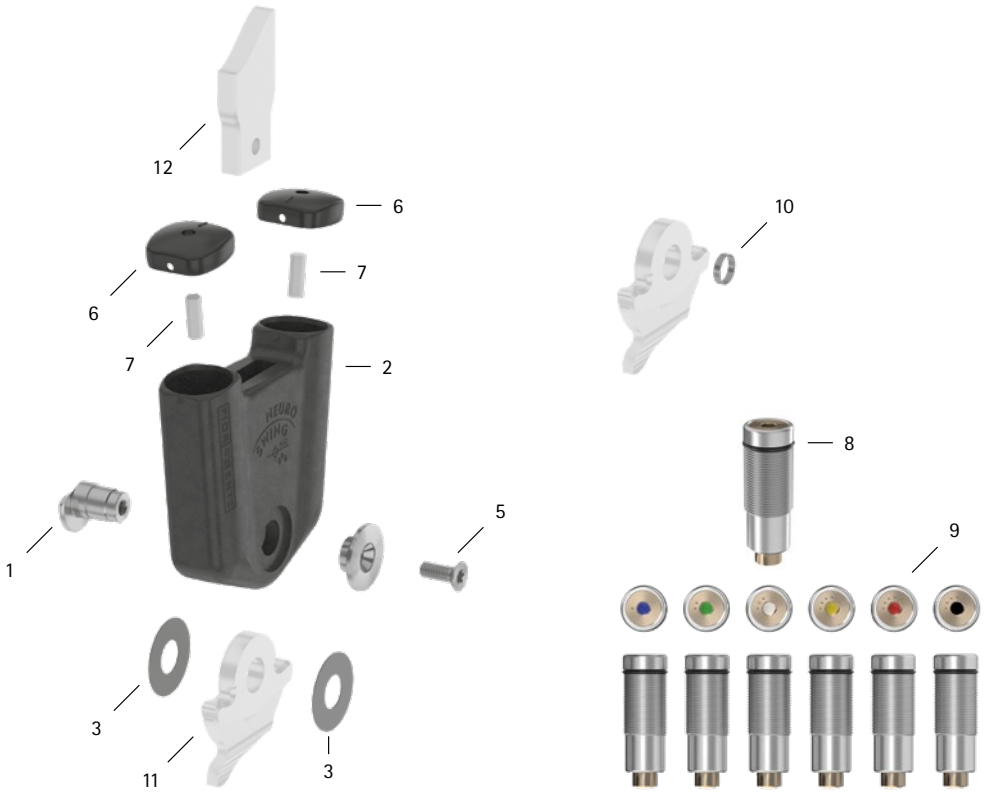

Pos.	24 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SF0597-C/1	boulon à goupille fendue	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
2	SF0507-C	boîtier de l'articulation	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
3	GS3013-040	rondelle de friction, Ø = 30 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS3013-047					
3	GS3013-050					
3	GS3013-055					
3	GS3013-060					
5	SC1416-L16	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SF0597-C/4/1	couvercle du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
7	SF0597-C/4/0	tige hexagonale	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
Mécanismes de ressort et butée dorsale statique						
8	VE3771-180/15	joint torique pour la fixation du mécanisme de ressort et de la butée dorsale statique	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	SF5807-C/15/12	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure bruits du mécanisme de ressort/de la butée dorsale statique	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	SF5807-C/15/25	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°				
9	SF5807-C/10/53	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°				
9	SF5807-C/10/80	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
9	SF5807-C/05/99	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
9	SF5807-C/0	butée dorsale statique, noire, liberté de mouvement de 0°				
Étriers de pied modulaires, ancres modulaires et montants modulaires						
10	BR1413-L070	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
12	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
-	-	liaison collée (montant modulaire/ancre modulaire et articulation modulaire)	rupture	coller un composant modulaire en carbone neuf	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

WP0130-FR-2026-09