


NOUVEAU

Articulations de genou et de cheville modulaires avec la **MODULARITÉ** plug+go



Articulations de genou modulaires avec la

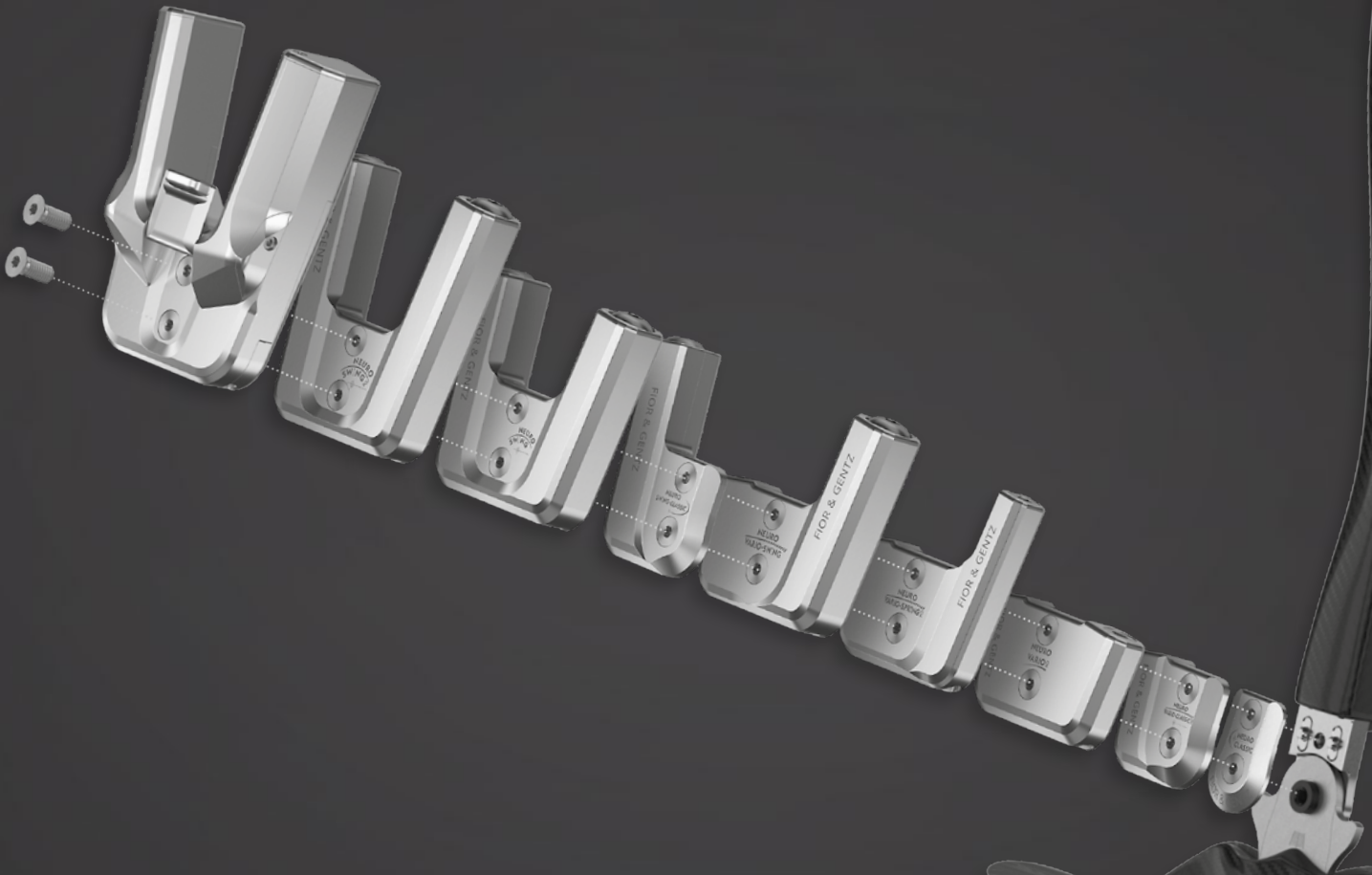

NOUVEAU dans la gamme de produits

un traitement flexible désormais possible

au **NIVEAU DU GENOU**



Deux articulations de genou modulaires à mouvement libre avec modularité plug + go ont été ajoutées à la gamme de produit : la NEURO VARIO 2 et la NEURO VARIO-SWING.

Les deux articulations modulaires offrent un réglage en continu et donc une adaptation aux besoins individuels du patient.

La transformation d'une articulation modulaire avec modularité plug + go en

une autre se fait en quelques gestes par le remplacement des ensembles fonctionnels.

En les combinant avec les articulations de cheville modulaires avec la modularité plug + go, il est possible de fabriquer une KAFO qui offre une flexibilité maximale de l'appareillage aux deux niveaux de l'articulation.

NEURO VARIO 2

l'option de traitement idéale pour les patients qui souhaitent utiliser tout leur potentiel de mouvement dans l'articulation de genou, mais ont besoin d'une butée d'extension statique

butée d'extension réglable en continu (0°-20°)

butée d'extension statique

transformable en NEURO VARIO-SWING

butée d'extension statique et réglable

monocentrique, à mouvement libre avec déport vers l'arrière

NEURO VARIO-SWING

l'option de traitement idéale pour les patients qui souhaitent utiliser tout leur potentiel de mouvement dans l'articulation de genou, mais ont besoin d'une butée d'extension dynamique

mécanismes de ressort interchangeables

amortisseur de butée d'extension

transformable en NEURO VARIO 2

butée d'extension dynamique et réglable

monocentrique, à mouvement libre avec déport vers l'arrière



... LA FONCTION POUR
PLUS DE **FLEXIBILITÉ**

FACILE ET RAPIDE À ASSEMBLER
FLEXIBLE EN UTILISATION



Notre gamme de produits d'articulations de cheville modulaires avec la modularité plug +go n'a cessé de croître ces dernières années, en raison de ses nombreux avantages et de la forte demande. Il existe désormais neuf articulations de cheville modulaires avec différentes fonctions pour répondre aux exigences les plus diverses.

La transformation d'une articulation modulaire avec la modularité plug + go en une autre se fait en quelques gestes par le remplacement des ensembles fonctionnels.

Toutes les articulations modulaires font appel aux mêmes parties supérieures d'articulation et aux mêmes étriers de pied modulaires.

D'autres articulations modulaires peuvent également être combinées ultérieurement par le limage de l'étrier de pied modulaire.

Cela permet d'offrir aux patients des traitements personnalisés et personnalisables, sans avoir à fabriquer une nouvelle orthèse complète. Il est ainsi possible de réagir rapidement et facilement à de nouveaux besoins du patient.


NEURO CLASSIC

le support d'articulation flexible pour les autres articulations de cheville modulaires avec modularité plug + go




NEURO VARIO-CLASSIC 2

l'articulation de cheville modulaire simple avec butée dorsale statique

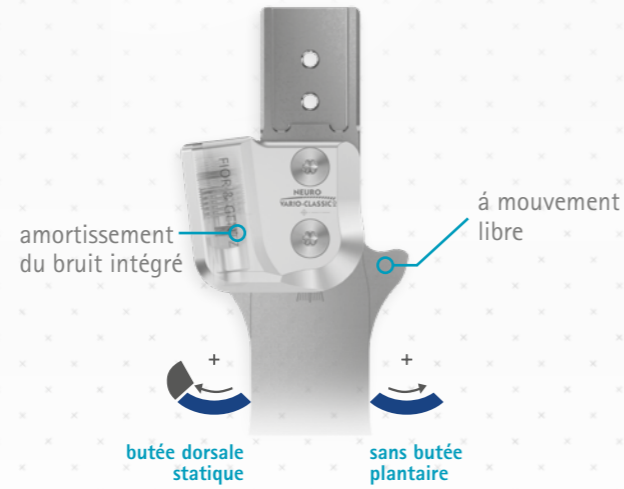


NEURO VARIO 2

l'option de traitement idéale pour les patients présentant des restrictions de mouvement sévères dans l'articulation talo-crurale

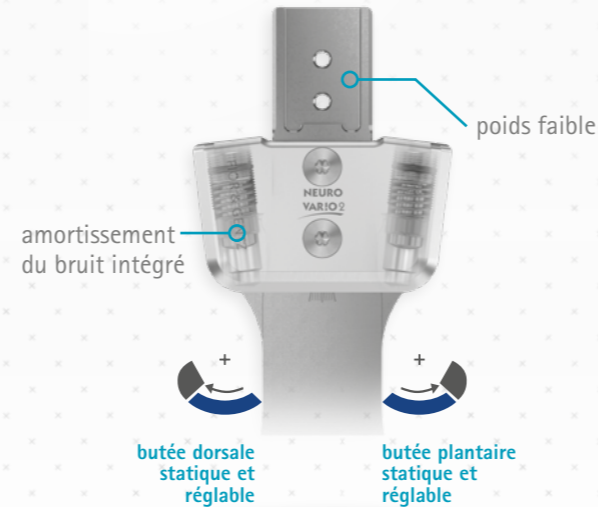

NEURO VARIO-SPRING 2

pour les patients présentant une faiblesse du releveur du pied et une forte limitation de mouvement en extension dorsale

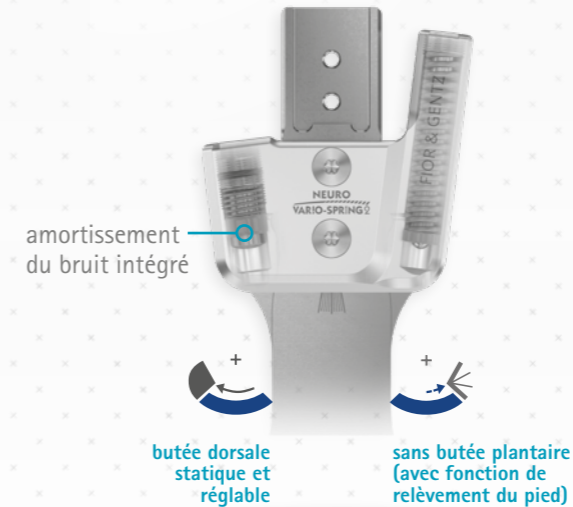


NEURO VARIO-SWING

l'option de traitement idéale pour les patients présentant des restrictions de mouvement sévères en extension dorsale et du potentiel de mouvement en flexion plantaire




NEURO SWING-CLASSIC

l'articulation de cheville modulaire simple avec butée dorsale dynamique

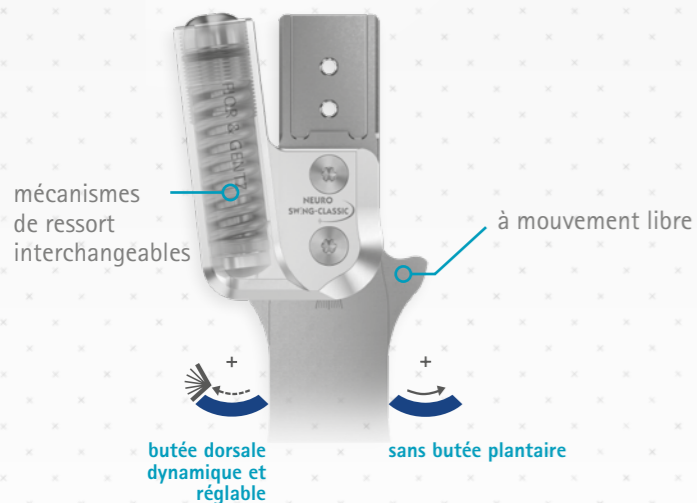


NEURO SWING

l'option de traitement idéale pour les patients qui souhaitent utiliser leur potentiel de mouvement dans toute l'articulation talo-crurale

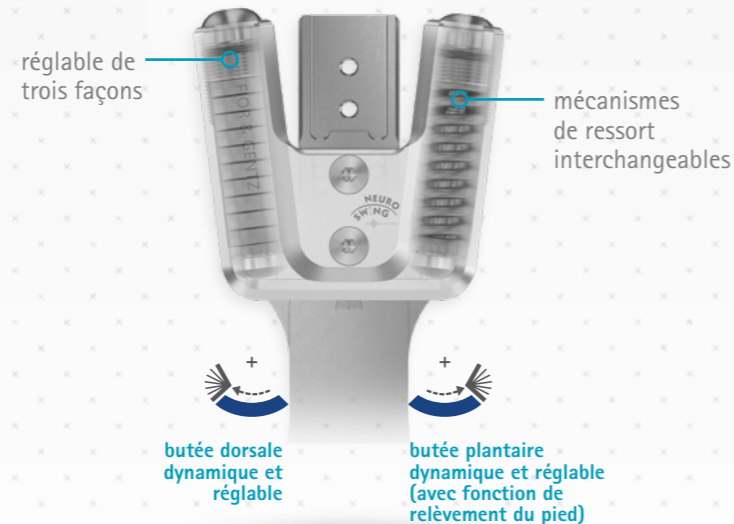

NEURO SWING 2

l'option de traitement idéale pour les patients qui souhaitent utiliser leur potentiel de mouvement dans toute l'articulation talo-crurale

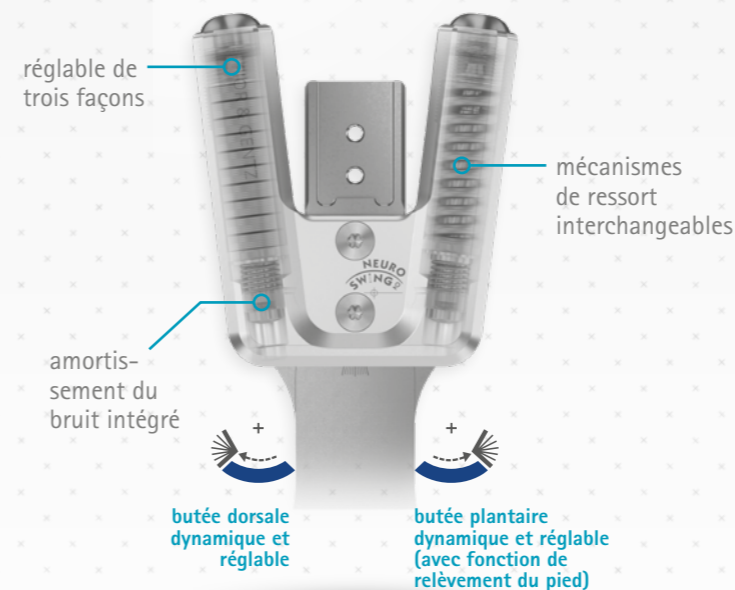


NEURO HiSWING

l'option de traitement idéale pour les patients actifs qui souhaitent adapter eux-mêmes leur orthèse à leur environnement



plug+go

MODULARITY

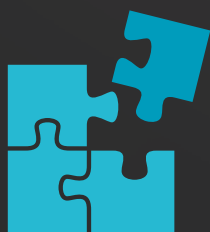

Configurateur d'orthèse

www.orthosis-configurator.com/fr

Souhaitez-vous fabriquer une orthèse avec modularité plug+go pour votre patient ?

Utilisez le Configurateur d'orthèse pour assembler vous-même les composants modulaires pour une orthèse avec modularité plug+go. Le Configurateur d'orthèse utilise les données du patient et la charge admissible pour déterminer les composants modulaires appropriés.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Allemagne)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.fr

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM